

Catálogo de Suturas



WELFARE

 **RESORBA**[®]
REPAIR AND REGENERATE

Conexões atraumáticas

Produção e qualidade

- As suturas RESORBA seguem diversos padrões de qualidade durante o processo de produção.
- A perfuração da conexão de encaixe fio/agulha é feita a laser, processo que elimina a chance de ocorrerem imperfeições na superfície da agulha.
- O encastoamento do fio é feito manualmente para garantir a uniformidade do corpo da agulha.

Perfuração




Laser


Convencional

Conexão e encastoamento

Suturas Resorba

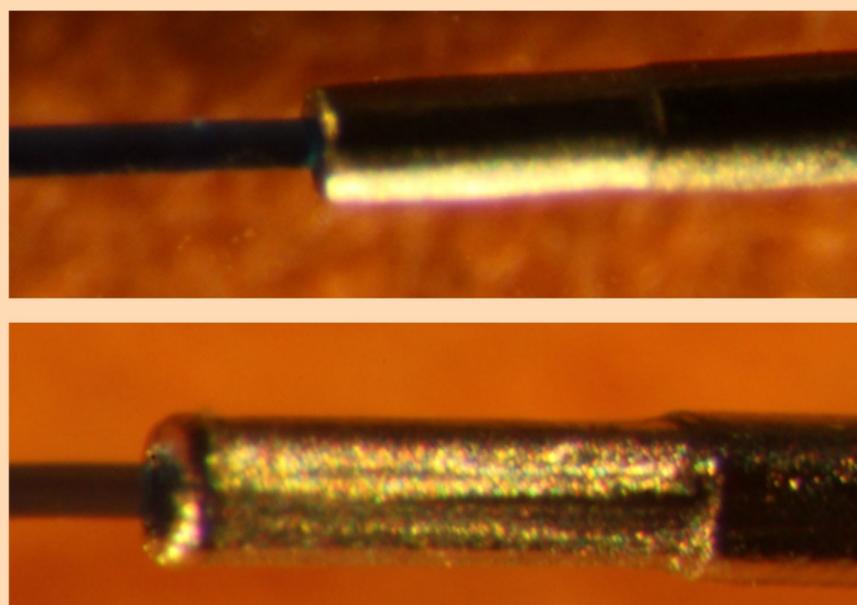

Suturas convencionais

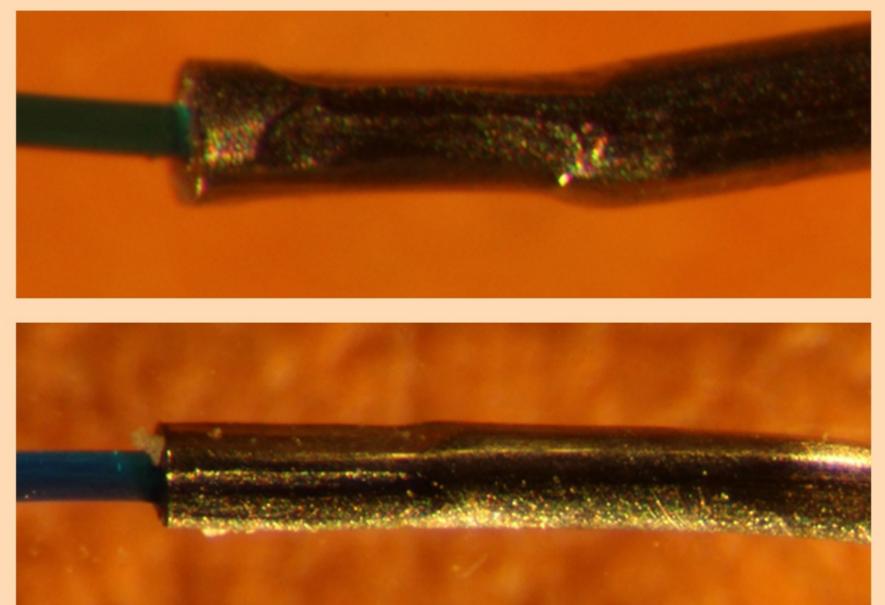

Agulhas cirúrgicas

Códigos

1ª Letra: define a curvatura da agulha

D = 3/8 de circunferência

H = 1/2 de circunferência

2ª Letra: define o formato do corpo e ponta da agulha

S = Corte reverso triangular

R = Corpo circular sem corte

3ª Letra: define atributos especiais


M = Agulha PREMIUM

T = Corte na ponta

Os últimos números definem o comprimento da agulha

D S M 16

Formatos

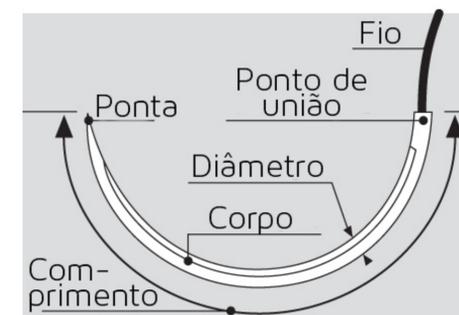

Números indicam o comprimento da agulha em mm (como se estivesse estendida)

mais utilizado

1/2-círculo = H

3/8-círculo = D

Curvatura



indicação

corpo circular camada posterior profunda

corpo circular retalho mucoperiosteal anterior

1/2-círculo, corpo circular, ponta de trocar = HRT

▼ HRT 16



▼ HRT 18



3/8-círculo, corte = DS
Corte PREMIUM = DSM

▼ DSM 11



▼ DSM 13



▼ DSM 16



Corte e corpo

Agulha com corte reverso

▼ ▼ = S

3/8-círculo = DS, DSM

cor preta especial para a linha ORAL



Agulha circular de corte

▼ = RT

1/23/8-círculo, assintótica ou reta = HRT, DRT, GRT, ART,

cor preta especial para a linha ORAL



- secção transversal da agulha triangular
- disponível com corte PREMIUM

- a ponta da agulha possui 3 arestas de corte o que produz um canal de punção estreito que penetra facilmente no tecido

Suturas Não absorvíveis

Formas de apresentação*


código	agulha	fio	qt. por caixa
88156	DSM 16	4/0 - 45cm	três dúzias (36)
88155	DSM 16	5/0 - 45cm	três dúzias (36)
88154	DSM 13	5/0 - 45cm	três dúzias (36)
88153	DSM 13	6/0 - 45cm	três dúzias (36)
881529	DSM 16	6/0 - 45cm	três dúzias (36)
881529	DSM 7	7/0 - 45cm	três dúzias (36)

*Para demais configurações de fios e agulhas, consulte-nos por um dos contatos presentes no site www.welfare.com.br.

Propriedades:

- flexibilidade e maciez acima da média
- fácil manuseio e trava no nó
- nenhuma capilaridade
- baixa resistência ao atravessar tecidos
- mínima reação tecidual

RESOLON®

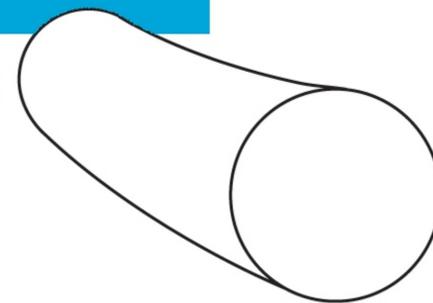

RESOLON assemelha-se ao NYLON como um fio monofilamentado de poliamida. Seu diferencial são os tratamentos especiais de superfície durante a produção, tornando-se excepcionalmente macio e flexível, mesmo quando esterilizado e seco. RESOLON é um fio monofilamentado de excelente manuseio e com grande segurança no nó.

- Cor: azul
- Material: poliamida 6-6.6
- Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gamma

Suturas Não absorvíveis

Formas de apresentação*

código	agulha	fio	qt. por caixa
DB25003	DSM 16	5/0 - 45cm	uma dúzia (12)
DB25001	DSM 13	6/0 - 45cm	uma dúzia (12)
DB25004	DSM 13	7/0 - 45cm	uma dúzia (12)

*Para demais configurações de fios e agulhas, consulte-nos por um dos contatos presentes no site www.welfare.com.br.


Propriedades:

- flexibilidade e maciez acima da média
- fácil manuseio e trava no nó
- nenhuma capilaridade
- baixa resistência ao atravessar tecidos
- mínima reação tecidual

Agulha preta:

- melhor visibilidade através do tecido
- alto contraste com o sangue
- evita reflexos de luz
- antiaderente a tecidos e resíduos

RESOTEX®

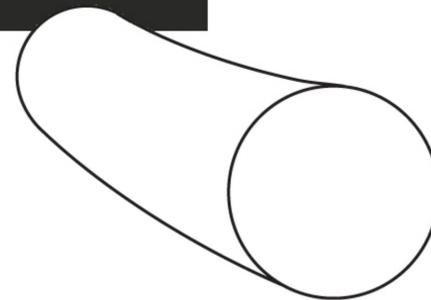


RESOTEX é um produto PREMIUM com fio monofilamentado de poliamida, excepcionalmente macio e flexível. Além de possuir excelentes propriedades de manuseio e segurança no nó, as suturas RESOTEX contam com as exclusivas agulhas pretas, cujo revestimento oferece menor resistência ao atravessar tecidos.

- Cor: preto
- Material: poliamida 6-6.6
- Método de esterilização: óxido de etileno ou raios gamma



SUPRAMID

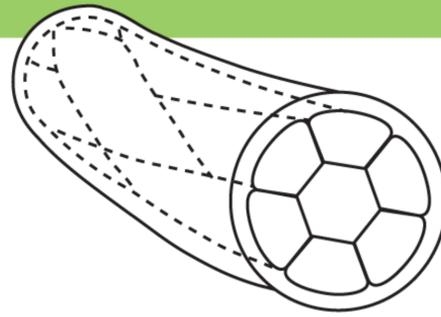

SUPRAMID está disponível como uma sutura pseudomonofilamentada, composta principalmente por poliamida 6.6, um polímero de hexametilenodiamina e ácido adípico, que é posteriormente revestida por uma capa de poliamida 6.

SUPRAMID também conta com as exclusivas agulhas negras RESORBA.

Formas de apresentação*

Características especiais

Apesar de sua origem sintética e devido à estrutura peptídica, SUPRAMID perde tensão gradualmente após sua aplicação. Tornando-se a opção mais adequada para algumas situações específicas.

- Cor: branco (sem tintura) ou preto
- Material:
interno: poliamida 6.6
externo: poliamida 6
- Método de esterilização:
óxido de etileno ou radiação gama

Propriedades:

- muito macio
- boas propriedades no nó
- mínima reação tecidual
- nenhuma capilaridade

Agulha preta:

- melhor visibilidade através do tecido
- alto contraste com o sangue
- evita reflexos de luz
- antiaderente a tecidos e resíduos

código	agulha	fio	qt. por caixa
6063	HRT 18	4/0 - 75cm	três dúzias (36)

*Para demais configurações de fios e agulhas, consulte-nos por um dos contatos presentes no site www.welfare.com.br.